


Garrot Tourniquet

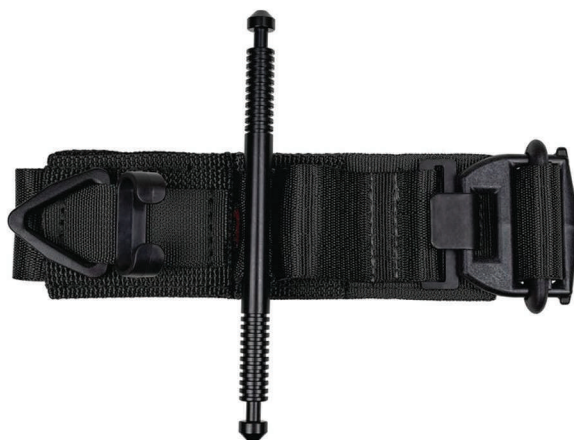

Garrot tourniquet Sof® Tactical :

Garrot dit "tourniquet" : technique de serrage fiable grâce à une tige qu'il suffit de tourner jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie du membre coupé (main, bras, jambe, pied).

Sangle de compression étudiée pour maximiser la compression et éviter la perte de pression après la mise en place et au-fur-et-à-mesure des utilisations.

Tige "tourniquet" à tourner pour contrôler le serrage jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie : prise en main facile et torsion constante.

Double blocage de la tige sans aucun risque de desserrage : un clip maintient la tige tourniquet avant de la fixer dans le verrou.

Étiquette visible pour indiquer l'heure de mise en place du garrot, non cachée par le dispositif de serrage.

Mise en place possible par-dessus un bandage ou un pansement.